

November 2009

Oszillierende Gipssäge Standard 500W, mit Staubabsaugung EXKLUSIV

Art.-Nr. **30.231.00**

für alle klassischen Gipsverbände (Weißgips) und Kunststoff-Steifverbände
auch große und dicke Gipse

bestehend aus:

- 30.216.22** Oszillierende Gipssäge Standard 500W, komplett einsatzbereit
- 30.216.25** Halter und Absaughaube für Gipssäge 30.216.22
- 30.231.10** Staubabsaugung mobil, einsatzbereit mit antistatischen Rollen und Saugschlauch, automatischem Anlaufen bei Start der Gipssäge und Nachlauf beim Abschalten, mit Steckdose zum Direktanschluss der Gipssäge komplett einsatzbereit mit HEPA-Filter-System, Papierfilter und Duftsticks

Exklusiv-Version mit geführtem, oben liegendem antistatischem Saugschlauch

max. Stromaufnahme: 1600 Watt
Geräusentwicklung max.: 63 - 69dBA

zusätzlich Gips-Staubabsaugerbeutelersatz

Art.-Nr. 30.230.99 bestehend aus:

- 1 Stück HEPA- Filter
- 6 Stück Staubbeutel
- 6 Stück Duftsticks



Technische Daten der Absaugung

Stromanschluss:	10A mittel -16A mittel, FI möglich
Kabellänge des Netzkabels:	Sauger ca. 3 m, Gipssäge ca. 5 m
Leistungsaufnahme:	1450 W Sauger, für Gipssägen bis 750 W
geprüft nach:	EN 60601
schutzisoliert:	doppelschutzisoliert
Motorenschutzschalter:	ja, Sicherung(en)
Motorlagerung:	staubgedichtet
Gewicht:	komplett ca. 14 kg

November 2009

Oszillierende Gipssäge Standard 500W, neues verbessertes Standardmodell

für alle klassischen Gipsverbände (Weißgips) und
Kunststoff-Steifverbände, auch große und dicke Gipse.
- Zubehör für Staubabsaugung auf Anfrage



30.216.22 Oszillierende Gipssäge 500 W „extra stark“, 230 V~, 50Hz u. 500 Watt
Leistung, mit **stufenloser Regelung** der Schwingungen/Minute,
sehr ruhigem Lauf und ergonomischem Gehäuse.
Für große und dicke Gipse geeignet, z.B. Becken- und Thoraxgipse.
Die Oszillationen/Schwingungen sind von 6500 Osz./min bis 24000 Osz./min
stufenlos regelbar.

komplett einsatzbereit mit:

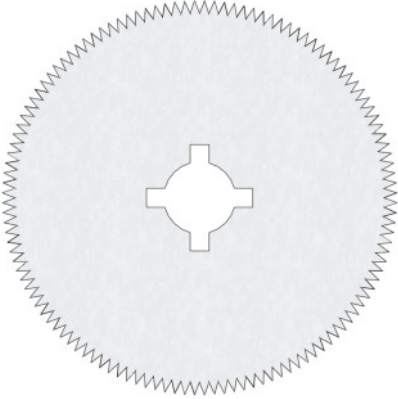
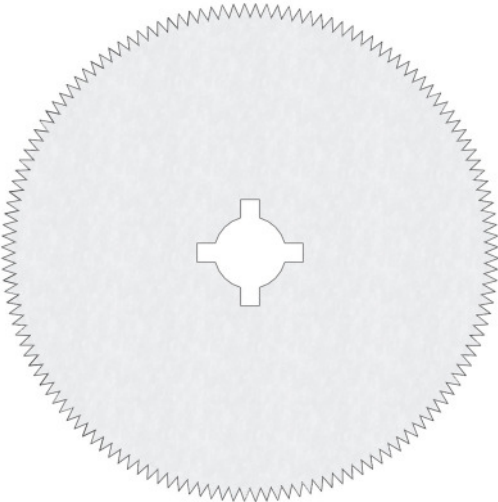
1 Stück **30.211.50** Sägeblatt 50 mm „hart“ für **alle Kunststoff-
Steifverbände und Gipsverbände (Weißgips)**

1 Stück **30.211.65** Sägeblatt 65 mm „hart“ für **alle Kunststoff-
Steifverbände und Gipsverbände (Weißgips)**

1 Paar **30.212.02** Gabelschlüssel zum Wechseln der Sägeblätter

Technische Daten:	Art.-Nr. 30.216.22
Stromanschluss :	230 V / 50-60 Hz,
Kabellänge des Netzkabels:	ca. 5 m
Leistungsaufnahme:	500 Watt
geprüft nach:	EN60601-1/ und -2, IEC 60601-1 und -2
Schutzklasse:	II nach VDE 0740
Schutzisoliert:	ja
Motorenschutzschalter :	vorhanden
Motorlagerung:	gipsstaubgeschützt mit verbesserter Ankerwelle
Gewicht	1.500 gr (mit Kabel)

**Sägeblätter für die
Oszillierende Gipssäge Standard 500W**

 <p>Abbildung Maßstab 1: 1</p>	<p>30.217.50 Sägeblatt 50 mm „smooth cut“ spezialbeschichtet für alle Kunststoff-Steifverbände und Gipsverbände (Weißgips)</p> <p>30.211.50 (alte Art.-Nr 07.07.124)</p> <p>Spezial-Sägeblatt 50 mm Kennzeichnung „hart“ für Kunststoff-Steifverband und Gipsverband (Weißgips)</p> <p>30.210.50 (alte Art.-Nr 07.07.120)</p> <p>Sägeblatt 50 mm für Gipsverbände (Weißgips)</p>
 <p>Abbildung Maßstab 1: 1</p>	<p>30.217.65 Sägeblatt 65 mm „smooth cut“ spezialbeschichtet für alle Kunststoff-Steifverbände und Gipsverbände (Weißgips)</p> <p>30.211.65 (alte Art.-Nr 07.07.125)</p> <p>Spezial-Sägeblatt 65 mm Kennzeichnung „hart“ für Kunststoff-Steifverband und Gipsverband (Weißgips)</p> <p>30.210.65 (alte Art.-Nr 07.07.121)</p> <p>Sägeblatt 65 mm für Gipsverbände (Weißgips)</p>

Weitere Produkte aus dem BÜHLER-Sortiment:

ACCU-FOX Gipssäge 30.200.00

 <p>20 cm</p> <p>15 cm 400 gr.</p>	<p><i>Patienten-freundliche Gipssäge, da</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Leise - leicht - handlich <p>Kein Sägeblattwechsel erforderlich, da Motor und Universal-Sägeblatt auf Kunststoff-Steifverband und Gipsverband (Weißgips) abgestimmt sind.</p> <p>Patientenschutz – reduzierte Erwärmung des Sägeblattes durch patentierte Sägeblatt-Geometrie.</p> <p>Bitte fordern Sie unseren separaten Prospekt an!</p>
<p>Autopsiesäge Standardmodell 30.218.20</p>	<p>Autopsiesäge 3-kant mit abnehmbarem und autoklavierbarem Sägekopf 30.219.20</p>
<p>Oszillierende Autopsiesäge, 220 V und 500 Watt.</p>  <p>Bitte fordern Sie unseren separaten Prospekt an!</p>	<p>Oszillierende Autopsiesäge, 230 V und 500 Watt. Der Sägekopf ist abnehmbar und autoklavierbar</p>  <p>Bitte fordern Sie unseren separaten Prospekt an!</p>